

**FINALITÀ**

La tecnologia **So-Up** proposta da Maya Beauty Engineering agisce su più fronti:

- stimola il metabolismo cellulare
- ripristina progressivamente collagene ed elastina
- favorisce il metabolismo dei grassi
- modella e scolpisce il corpo
- lifta e riempie il viso.

L'efficacia del sistema si basa sulla sinergia tra le varie tecnologie integrate nell'apparecchiatura: **radiofrequenza, ultrasuono, massaggio connettivale, fotodinamica**. Trattandosi di un'apparecchiatura che tratta viso e corpo, non ha stagionalità e consente di lavorare 365 giorni all'anno.

**PROGRAMMI**


L'apparecchiatura **So-Up** dispone di programmi liberi e programmi pre-impostati per viso e corpo.

• **Viso:**

pelle giovane, pelle disidratata e senescente, couperose pelle sensibile, viso e collo.

• **Zone Periferiche:** seno e décolleté, cicatrici post acne, arti superiori, benessere, drenaggio.

• **Corpo:** rilassamento cutaneo, drenaggio, smagliature, tessuti adiposi, inestetismi legati alla cellulite edematosa, inestetismi legati alla cellulite fibrosa, benessere, thermorelax.

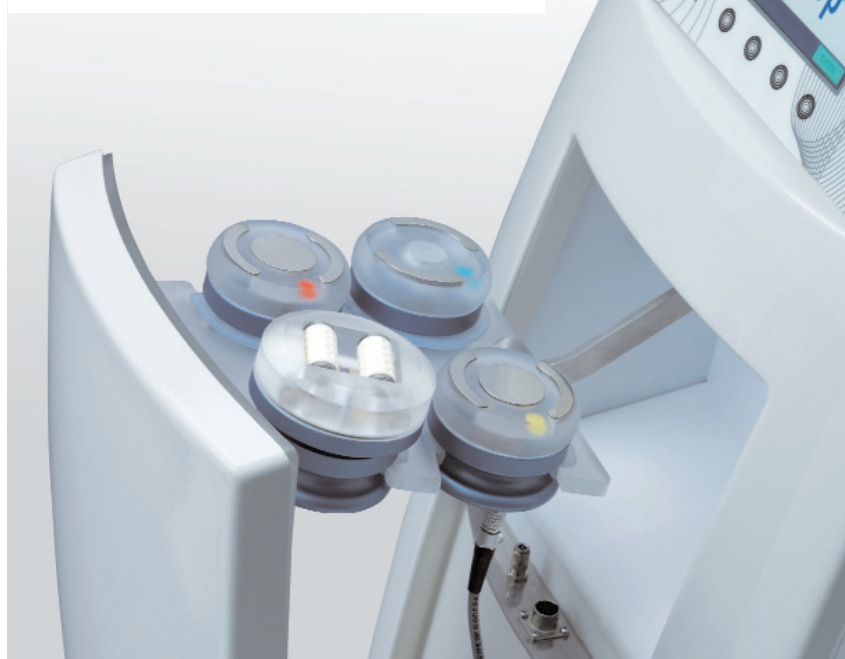

**I MANIPOLI VISO**


**Manipolo massaggio connettivale.** Il segreto del massaggio connettivale sta nella tipologia del manipolo. Un'area sotto vuoto crea all'interno di specifici manipoli attira dall'esterno la pelle, risucchiandola. La trazione tenta di scolare gli strati sottostanti, richiamando attivamente fluidi e sangue ossigenato. Ogni elemento connettivale, quindi, viene coinvolto. Il manipolo esegue 3 tipi di lavoro per programmi estetici.

**1. Aspirazione continua:** il manipolo crea una depressione costante, ideale per trattamenti linfodrenanti.

**2. Aspirazione pulsata:** la depressione segue una ritmicità programmata.

Si effettua un lavoro di riallineamento. Ideale per trattare tessuti flaccidi e rilassati, doppio mento, seno cadente.

**3. Aspirazione pulsata sincrona:** la depressione è in sincronia con il battito cardiaco. Ogni impulso cardiaco (sistole), spinge una determinata quantità di sangue ossigenato nel sistema arterioso. Un sensore capta la frequenza cardiaca del soggetto da trattare e la trasmette alla macchina che da quel momento aiuta il cuore ad irrorare i tessuti più periferici. Stimolazione delle stazioni linfonodali. Ideale per trattare la flaccidità dei tessuti, il doppio mento e, sul corpo, gli edemi, gli inestetismi della cellulite, le smagliature di recente insorgenza, il rilassamento del seno.

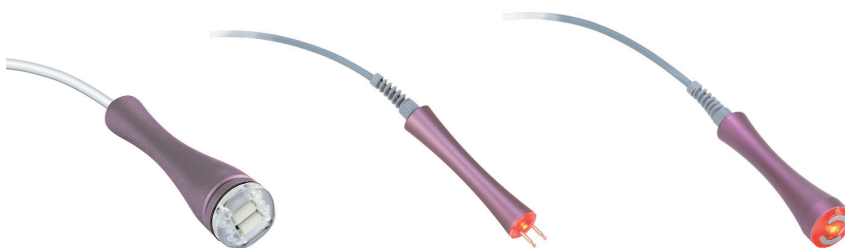

**Manipolo RF 1.** Provvisto di 2 antenne erogatrici di **radiofrequenza** e **fotostimolazione**, consente di trattare con efficacia ogni singolo avvallamento agendo ai margini della ruga.

Sulla palpebra svolge un'azione lifting estremamente precisa che nessun'altra apparecchiatura dispensatrice di radiofrequenza consente.

Ideale per agire in aree difficili e delicate quali bocca e occhi, migliora significativamente smagliature, cicatrici e favorisce la ripresa della tonicità dei muscoli pelliccioli.

Uno strumento particolarmente duttile dunque, capace di adattarsi a un'infinità di programmi differenti.

**Manipolo RF 2.** Di forma piatta, coniuga la **radiofrequenza** all'azione **fotodinamica**. Grazie anche alla particolare struttura che ne facilita lo scorrimento su aree estese del viso, produce un'agevole biostimolazione e un consistente effetto lifting. Rimodella i contorni del viso, sostiene le aree critiche e biostimola l'epidermide mediante.

**I MANIPOLI CORPO**

**1. Manipolo Massaggio Connettivale.** Presenta le stesse caratteristiche di quello viso ma ha dimensioni più ampie.

**2. Manipolo RF 1.** Pratico e maneggevole, questo manipolo abbina l'azione della **radiofrequenza bipolare** e degli **ultrasuoni** alla stimolazione **fotodinamica**. Garantisce, quindi, un'azione lipolitica e rassodante in contemporanea. Dotato di due zone erogatrici di radiofrequenza ben distinte, consente di annullare la dispersione di energia e stimolare il tessuto trattato. Il manipolo permette all'operatore di lavorare anche in atermia (assenza di calore) senza surriscaldare i tessuti, pur trasferendo loro la biostimolazione prodotta dalla radiofrequenza.

**3. Manipolo RF 2.** Un manipolo concepito per la **radiofrequenza** e gli **ultrasuoni**, in grado di esplicare anche un'azione **fotodinamica** detossinante. Ideale per trattare con efficacia le aree colpite da inestetismi della cellulite, edemi e ristagni linfatici. Come il precedente, questo manipolo consente all'operatore di lavorare anche in atermia (assenza di calore) senza surriscaldare i tessuti pur facendoli beneficiare della biostimolazione esercitata dalla radiofrequenza.

**4. Manipolo RF 3.** Un manipolo leggero ed ergonomico che induce una biostimolazione foto-termo-rilassante. La sua maneggevolezza lo rende ideale per tutti i trattamenti benessere mirati allo scioglimento delle tensioni.

**SUPPORTO FORMATIVO E MARKETING**

Maya Beauty Engineering supporta i propri clienti con corsi di formazione ed approfondimento che permettono di ottenere i migliori risultati. Organizza giornate "porte aperte", meeting tra estetiste utilizzatrici per lo scambio di idee, consigli pratici e nuove metodiche. L'acquisto di **So Up** è accompagnato da un **"Kit iniziale di prodotti l'magine"** per l'ottenimento dei migliori risultati in istituto e a domicilio.

Tutte le apparecchiature MBE vengono fornite con un "kit marketing" composto da materiale da vetrina, documentazione da sala d'attesa, poster, DVD.

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPARECCHIATURA**

**Peso:**

27 kg (esclusi manipoli e dotazioni)

**Larghezza:** 40 cm

**Profondità:** 48 cm

**Altezza:** 132 cm

**Temperatura ambiente durante l'operatività:** da 15 a 35 °C

**Umidità:**

dal 5 al 95% di umidità relativa

**Voltaggio di alimentazione:**

115 - 230 V.a.c.

**Potenza assorbita in ingresso:**

250W

**Potenza d'uscita:** 46 W

**Area radiante effettiva di RF:**

34,19 cm<sup>2</sup>

**Area radiante effettiva di US:**

10,17 cm<sup>2</sup>

**Frequenza RF:** 0,5 MHz

**Frequenza US:** 2 MHz



**Pressione Vacuum:**

da -5 cmHg a -60 cmHg

**Lunghezza d'onda impiegata:**

580 nm/640 nm/470 nm

**MANIPOLI E ACCESSORI**

**Manipoli Viso: N. 3**

- Manipolo massaggio connettivale viso (rulli) + accessorio vacuum

- Manipolo antenne RF+Fotodinamica

- Manipolo piatto RF+Fotodinamica

**Manipoli Corpo: N. 3**

- Manipolo massaggio connettivale corpo (rulli) + accessorio vacuum

- 2 Manipolo RF+US+Fotodinamica

- 1 Manipolo RF+Fotodinamica

L'APPARECCHIATURA DISPONE DI PROGRAMMI LIBERI E PRE-IMPOSTATI PER IL VISO E PER IL CORPO

